

Серия - SJ



Технические лабораторные весы



Незаменимые функции по доступным ценам



Наука и образование



Производство лакокрасочных изделий



Производство строительных материалов




Фармацевтика и биотехнологии

Серия SJ - весы с базовыми функциями измерения:

- Счетный режим
- Процентный режим
- Режим сравнения
- Суммирование

Гарантия 7 лет


| Модель | SJ-220CE | SJ-420CE | SJ-620CE | SJ-1200CE | SJ-2200CE | SJ-4200CE | SJ-6200CE | SJ-12KCE |
|----------------------|----------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|----------|
| Max, г | 220 | 420 | 620 | 1200 | 2200 | 4200 | 6200 | 12000 |
| Min, г | 0,2 | | 0,5 | 5 | | | 50 | |
| Дискретность, г | 0,01 | | | 0,1 | | | 1 | |
| Класс точности | Высокий (II) | | | | | | | |
| Дисплей | Жидкокристаллический | | | | | | | |
| Размер платформы, мм | 140 | | | 170x142 | | 180x160 | | |
| Калибровка | Внешняя | | | | | | | |
| Интерфейс | RS232C | | | | | | | |
| Габариты, мм | 235x182x75 | | | | 265x192x87 | | | |
| Вес, кг | ≈1,3 | | | | ≈2,7 | | | |

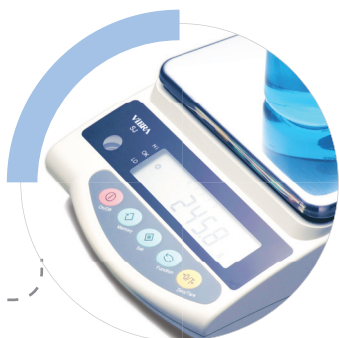

Преимущества технологии Tuning-Fork

Использование датчика Tuning-Fork в весах VIBRA серии SJ дает пользователю уникальные преимущества:

- Быстрое начало работы – вход в рабочий режим в течение 1 минуты;
- Высокая точность и воспроизводимость результатов;
- Экстремально низкая зависимость от температуры окружающей среды;
- Устойчивость к перегрузу (в 15 раз).

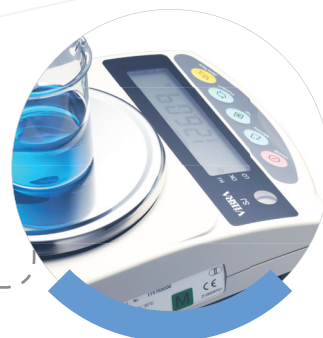

Возможность работы от встроенного аккумулятора

Опционально все весы серии SJ имеют возможность непрерывной работы от встроенного аккумулятора. Это позволяет использовать весы в мобильных лабораториях и при выездной работе.



Портативность

Сочетание автономного питания и компактности позволяет использовать весы VIBRA серии SJ даже в передвижных лабораториях.




Гистограмма нагрузок

Дисплей гистограммы нагрузок с 20 делениями графически отображает долю оставшего веса от Max нагрузки.



Прозрачный защитный чехол для корпуса

Позволяет с легкостью очищать весы и использовать в производственных условиях.

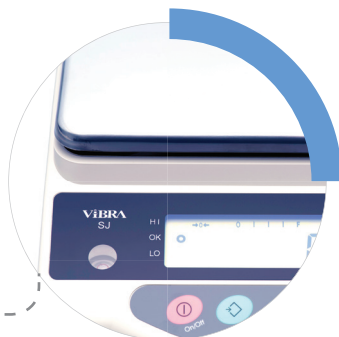

Прочность и неприхотливость к условиям эксплуатации

Весы VIBRA серии SJ слабо подвержены повреждениям во время транспортировки или вследствие ненадлежащего обращения.